

**HANDLEIDING - RELAXZETELS** p. 1-10

**MANUEL - FAUTEUILS RELAX** p. 11-20





## Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Beschrijving van de onderdelen
3. Persoonlijke veiligheid
4. Montage-instructies
5. Bedieningsinstructies & richtlijnen
6. Onderhoud
7. Specificaties
8. Garantie



### LEZEN VOOR GEBRUIK, BIJ NIET-NALEVING KAN DE GARANTIE VERVALLEN

Er moet voldoende vrije ruimte zijn tussen:

- ACHTERKANT ZETEL en MUREN
- VOETENSTEUN en voorwerpen VOOR DE ZETEL

Tijdens het bedienen van de zetel mogen geen kinderen, huisdieren en/of vreemde voorwerpen zich achter, onder en/of voor de voetensteun bevinden.

Hun eventuele aanwezigheid kan lichamelijke verwondingen of schade aan de zetel veroorzaken.

## 1. Inleiding:

De opricht- & relaxzetel is een comfortabel en stijlvol meubel dat de mobiliteit van de gebruiker verbetert. Onze zetels zijn verkrijgbaar in diverse kleuren, zodat zij in alle interieurs passen. Zij voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.

**Het maximaal toegelaten gewicht voor de zetel bedraagt 150 kg.**

Een relaxzetel met oprichthulp is bedoeld voor ouderen, fragiele, zwakke of gehandicapte personen die moeilijk kunnen opstaan vanuit zithouding.

## 2. Beschrijving van de onderdelen:



- 1. HOOFDKUSSEN
- 2. RUGLEUNING
- 3. ARMLEUNING
- 4. AFSTANDBEDIENING
- 5. ZITKUSSEN
- 6. VOETENSTEUN

(afwijkingen mogelijk tussen afgedrukte modellen en de werkelijkheid)

---


### 3. Persoonlijke veiligheid:

ALLE veiligheidsrichtlijnen in deze gebruikershandleiding moeten opgevolgd worden zodat u gedurende vele jaren op een veilige manier van uw zetel kan genieten. Niet-naleving van deze richtlijnen kan verwondingen veroorzaken!

- De zetel mag slechts door één persoon tegelijk gebruikt worden. De maximale belasting bedraagt 150 kg.
- De voetensteun is uitsluitend bedoeld als rustbankje voor de voeten. Het is verboden om op de voetensteun te zitten of het volledige lichaamsgewicht hierop te laten rusten (inclusief huisdieren en kinderen).
- Tijdens de bediening moet de relaxzetel voldoende verwijderd zijn van muren en meubels om schade aan de bekleding en het interieur te vermijden. De aanbevolen minimumafstand tot een muur is 65 cm voor de Carey en 15 cm voor de België.
- Kinderen en huisdieren moeten in de nabijheid van de zetel altijd onder toezicht staan. Kinderen mogen de zetel NIET BEDIENEN. Maak bezoekers attent op de mogelijke klemgevaaren die van alle mechanismen van de zetel uitgaan.
- Voor het uitklappen van de voetensteun wordt gebruik gemaakt van een “schaarmechanisme”. Houd lichaamsdelen, vingers, kledij, dekens, enz. altijd verwijderd van het schaarmechanisme.
- In bepaalde omstandigheden en voor bepaalde medische aandoeningen moet de gebruiker de relaxzetel met oprichthulp leren gebruiken onder toezicht van een opgeleide assistent. Dit kan een professionele verzorger zijn of een familielid die een opleiding genoten heeft om de gebruiker van de relaxzetel met oprichthulp in zijn dagelijkse activiteiten bij te staan.
- Controleer de afstandsbediening en het stroomsnoer regelmatig op tekenen van slijtage, schuursporen en scheuren. U moet er ook op letten dat geen vloeistof of voedselresten in de elektrische of mechanische zones kunnen binnendringen. Dit kan de prestatie negatief beïnvloeden en de levensduur van uw zetel verkorten. Als vloeistoffen of voedselresten in de elektrische of mechanische onderdelen van de zetel binnendringen, kan de zetel dienst weigeren. Dit kan tot een gevaarlijke situatie leiden als de gebruiker alleen is.
- Onachtzaamheid veroorzaakt brand. Hoewel het schuim en de bekleding van de zetel brandvertragend zijn en aan de wettelijk opgelegde normen voldoen, moet u de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om brand te vermijden.
- Wij raden ten eerste aan dat de gebruiker geen tabak of andere rookwaren gebruikt als hij in de zetel zit. Houd de zetel ook uit de buurt van mogelijke brandhaarden zoals elektrische kachels en gashaarden.
- Het is verboden op de armleuningen te zitten; dit kan het volledige frame destabiliseren en de mechanische werking van uw zetel negatief beïnvloeden. Hierdoor vermindert ook de algemene veiligheid en wordt de levensduur van de zetel verkort.
- Alle bedrading en kabels moeten stevig onder de zetel vastgemaakt worden; de stekker moet stevig in het wandstopcontact gestoken worden.


## 4. Montage-instructies:

### MONTAGE VAN DE RUGLEUNING

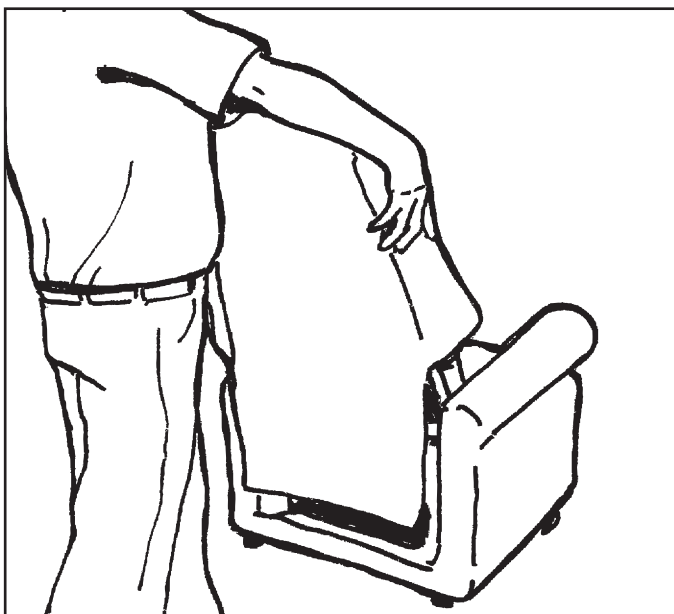


- De sleuven bevinden zich aan de binnenkant van de zetel.
- De rugleuning en de zitting zijn los van elkaar verpakt.
- Plaats de rugleuning op de sleuven en druk de rugleuning omlaag, zodat zij aan beide kanten in positie vastklikt.

### DE RUGLEUNING VERWIJDEREN

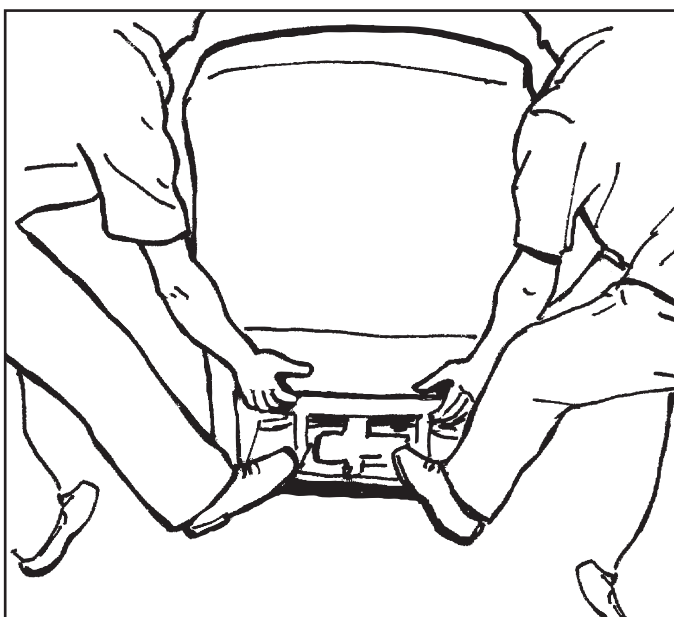


- De rugleuning dient verwijderd te worden door 2 personen. Gelieve tegelijkertijd de rugleuning aan de uiteinden te nemen en uit het onderste gedeelte van de zetel te trekken.

### STROOMAANSLUITING

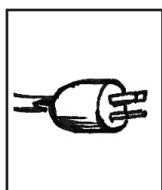

AANSLUITING  
AAN DE ZETEL

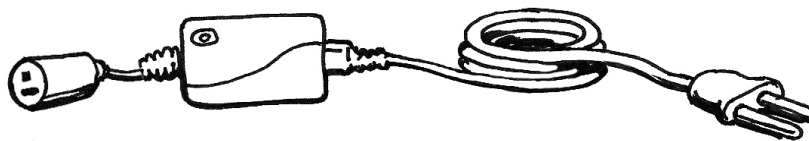

STEKKER  
STOPCONTACT

## 5. Bedieningsinstructies & richtlijnen:

### Zetel BELGI

De BELGI kan opgericht worden om de gebruiker te helpen bij het opstaan of het gaan zitten; daarnaast kan in één beweging de rugleuning versteld en de voetensteun uitgeklapt worden.



#### In de zetel gaan zitten:

Ga naast uw zetel staan en druk op knop OMHOOG (1) om de zetel te laten stijgen tot een hoogte waarop u op een comfortabele manier tegen de zitting kan leunen. Deze hoogte varieert van persoon tot persoon. Als de zetel de gewenste hoogte bereikt heeft, leunt u tegen de zetel en drukt u op knop OMLAAG (2). Terwijl de zetel daalt, wordt u automatisch in zithouding gebracht. Laat knop OMLAAG (2) los zodra u comfortabel zit.

#### De rugleuning samen met de voetensteun verstellen:

Druk op knop OMLAAG (2) en leun achterover terwijl de rugleuning zich naar achter verplaatst en de voetensteun geleidelijk openklapt. Zodra de zetel de gewenste positie bereikt heeft, laat u knop OMLAAG (2) los, waardoor de beweging van de zetel stopt.

#### Uit de zetel opstaan:

Druk op knop OMHOOG (1). Als de rugleuning achterover geleund is, beweegt de zetel naar zitpositie en begint vervolgens zachtjes en langzaam te stijgen. Verplaats uw gewicht naar voren tijdens het stijgen. Om uw evenwicht te bewaren kunt u tijdens het stijgen de armleuningen vasthouden. Als de zetel een hoogte bereikt, waarop u gemakkelijk kunt opstaan, laat u knop OMHOOG (1) los. U kunt nu uit de zetel opstaan.



## Zetel CAREY

De CAREY kan opgericht worden om de gebruiker te helpen bij het opstaan of het zitten gaan; daarnaast kunnen de rugleuning en voetensteun **APART** worden bediend.

### In de zetel gaan zitten:

Ga naast uw zetel staan en druk op knop 1 om de zetel te laten stijgen tot een hoogte waarop u op een comfortabele manier tegen de zitting kan leunen. Deze hoogte varieert van persoon tot persoon. Als de zetel de gewenste hoogte bereikt heeft, leunt u tegen de zetel en drukt u op de knop 2. Terwijl de zetel daalt, wordt u automatisch in zithouding gebracht. Laat de knop 2 los zodra u comfortabel zit.

### De rugleuning verstellen:

Druk op knop 3 en leun achterover terwijl de rugleuning zich naar achter verplaatst. Druk op knop 4 om de rug naar voren te bewegen. Zodra de zetel de gewenste positie bereikt heeft, laat u de knop los, waardoor de beweging van de zetel stopt.

### Om het voetgedeelte te verstellen:

Druk op knop 2 om het voetgedeelte naar boven te bewegen.  
Druk op knop 1 om het voetgedeelte naar onder te bewegen.  
Laat de knop los wanneer de gewenste positie is bereikt.

### Uit de zetel opstaan:

Druk op knop 4 tot de rug verticaal staat. Druk vervolgens op knop 1. (Knop 4 en knop 1 mogen ook tegelijkertijd ingedrukt worden.) Verplaats uw gewicht naar voren tijdens het stijgen. Om uw evenwicht te bewaren kunt u tijdens het stijgen de armleuningen vasthouden. Als de zetel een hoogte bereikt, waarop u gemakkelijk kunt opstaan, laat u knop 1 los. U kunt nu uit de zetel opstaan.

### Zetel in ligpositie zetten:

Vertrek vanuit zitpositie (zie 'in de zetel gaan zitten') en druk vervolgens op knop 2 en 3. Hoofd- en voetgedeelte zullen helemaal horizontaal komen te staan. Om terug recht te komen drukt u knop 1 en knop 4.





## 6. Onderhoud:

### Onderdelen van PU:

- PU bestaat uit textiel met een TPU (Thermoplastisch polyurethaan) bekleding.
- PU producten zijn biologisch afbreekbaar.
- PU producten hydrolyseren/ontbinden na verloop van tijd.
- Aan het PU oppervlak kan de TPU laag een droog, poederig of gedesintegreerd uitzicht krijgen.
- Reinig een PU zetel niet met water, alcohol of andere chemische producten.
- Lederolie legt een beschermende laag op de PU bekleding, waardoor zijn levensduur verlengt.

### Elektrische besturingssystemen:

Controleer het snoer en de afstandsbediening regelmatig op barsten, slijtage, gaten en losse bedrading. Verwijder stof, vuil en rommel rond en onder de zetel.

### Mechanisch gedeelte :


Dit is onderhoudsvrij, maar mag regelmatig stofvrij gemaakt worden.

In geval van een probleem of als u reserveonderdelen nodig heeft, moet u contact opnemen met uw plaatselijke verdeler.

## 7. Specificaties:

**De zetel Belgi moet op MINSTENS 15 cm van de muur geplaatst worden.**

**Voor de Carley moet men 60 cm voorzien. Dit om schade aan de zetel, de muur en verwonding van de gebruiker tijdens het bedienen te vermijden.**

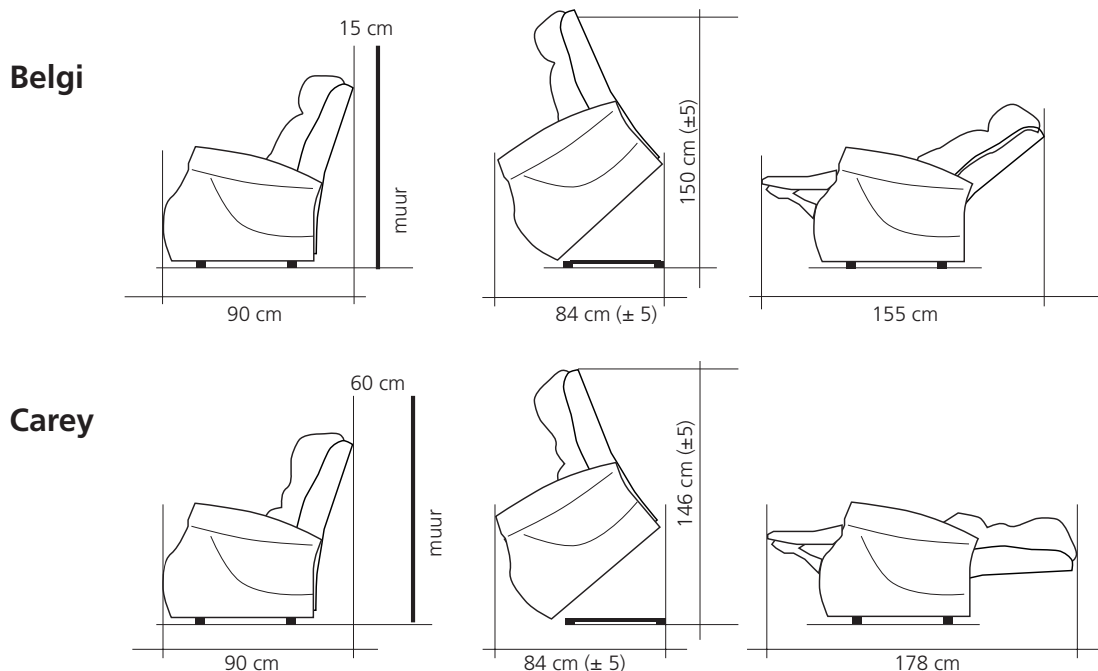

### Elektronisch:

- input AC 100V-240V, output DC 29V.
- het verbruik in werking is 52Watt naargelang het gewicht van de gebruiker, in standby is 0.3Watt.

---

## 8. Garantie:

Uw relaxzetel met oprichthulp beschikt over een uitgebreide garantie van **2 jaar op de elektrische en mechanische componenten en 3 jaar op de PU-bekleding, vanaf de datum van aankoop.**

### Garantievoorwaarden:

1. Deze garantie is niet overdraagbaar.
2. Alle werkzaamheden aan de zetel moeten door een erkende plaatselijke verdeler uitgevoerd worden. Worden deze werkzaamheden uitgevoerd door iemand anders dan een erkende plaatselijke verdeler, dan vervalt de garantie.  
Neem contact op met uw plaatselijke verdeler.
3. De garantie zal in geen geval gelden als de zetel moet hersteld worden als rechtstreeks gevolg van:
  - Het niet onderhouden van de onderdelen van de zetel volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
  - Het gebruik van andere dan de door de fabrikant gespecificeerde onderdelen.
  - Beschadiging van de zetel of zijn onderdelen door nalatigheid, ongeval of onjuist gebruik.
  - Wijziging van de zetel of zijn onderdelen ten opzichte van de specificaties van de fabrikant of herstellingen uitgevoerd door iemand anders dan uw erkende plaatselijke verdeler.

Worden niet gedekt door deze garantie:

- Schade door misbruik door de gebruiker of overschrijding van het maximaal gebruikersgewicht.
- Natuurlijke vervaging van de kleur van het materiaal na verloop van tijd of door blootstelling aan het zonlicht.
- Schade door lekken of morsen
- Beschadiging door het schuren tegen muren en/of interieurelementen en/of meubels.
- Toevallige scheuren en beschadigingen of brandvlekken van sigaretten en lucifers

In geval van problemen met uw zetel moet u uw plaatselijke verdeler contacteren en hem alle nodige details verstrekken zodat een snelle interventie mogelijk is.



Het CE certificaat van het product is geldig voor alle markten.

## MANUEL - FAUTEUILS RELAX

< BELGI

CAREY >



---

## Table des matières :

1. Introduction
2. Description des composants
3. Sécurité de l'utilisateur
4. Instructions de montage
5. Instructions d'emploi
6. Entretien
7. Spécifications
8. Garantie



### **ATTENTION**

#### **LIRE AVANT EMPLOI EN CAS DE NON-RESPECT, LA GARANTIE DEVIENT NULLE**

Prévoyez suffisamment d'espace libre entre :

- L'ARRIERE DU FAUTEUIL ET LE MUR
- LE REPOSE-PIED et tout OBJET DEVANT LE FAUTEUIL

Lors du mouvement du fauteuil, toute présence d'enfants, d'animaux et/ou d'objets étrangers derrière, au-dessous et/ou devant le repose-pied est strictement interdite.

Leur présence éventuelle peut entraîner des blessures physiques ainsi que des dégâts au fauteuil.

## 1. Introduction:

Les fauteuils / releveurs électriques sont conçus pour être à la fois confortables et esthétiques tout en améliorant la mobilité de l'utilisateur.

Nos fauteuils sont disponibles en plusieurs coloris qu'ils s'harmonisent parfaitement avec la majorité des aménagements intérieurs. Ils sont fabriqués selon les normes de qualité les plus sévères.

**Le poids de l'utilisateur est limité à 150 kg.**

Un fauteuil relax est destiné aux personnes âgées, faibles ou à mobilité réduite, qui ont des difficultés à se lever.

## 2. Description des composants:



1. TETIERE
2. COUSSIN DU DOSSIER
3. ACCOUDOIR
4. TELECOMMANDE
5. COUSSIN DU SIEGE
6. REPOSE-PIED

**(ATTENTION: il peut y avoir des différences mineures entre les images imprimées et les produits effectifs.)**

---


### 3. Sécurité de l'utilisateur :

TOUTES les consignes de sécurité décrites dans ce manuel doivent être strictement observées et respectées pour que vous puissiez bénéficier de manière sûre de votre fauteuil pendant de longues années. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures physiques!

- Le fauteuil ne doit être utilisé que par une personne à la fois.  
Le poids maximal est limité à 150 kg.
- Le repose-pied est exclusivement destiné à se reposer les pieds. Il est strictement interdit de s'asseoir ou de reposer tout le poids corporel sur le repose-pied surélevé (y compris les animaux et les enfants).
- Ecartez le fauteuil suffisamment de murs et meubles pour éviter tous dégâts au fauteuil, à vos meubles ou à votre aménagement intérieur. La distance minimale recommandée par rapport à un mur est de 65 cm pour le Carey et 15 cm pour le Belgi.
- Les enfants et les animaux doivent toujours être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité du fauteuil.
- Les enfants ne doivent pas actionner le fauteuil. Faites remarquer aux visiteurs les risques de coincement/d'écrasement émanant de tous les mécanismes du fauteuil.
- Le repose-pied est surélevé au moyen d'un mécanisme à ciseaux. Ecartez les parties corporelles, les doigts, les vêtements, les couvertures etc. du mécanisme à ciseaux.
- Dans certaines circonstances et pour certaines affections, il faut que l'utilisateur apprenne à utiliser le fauteuil / releveur électrique en présence d'un assistant formé, un garde-malade professionnel ou un membre de la famille qui a suivi une formation pour assister l'utilisateur du fauteuil relax dans ses activités quotidiennes.
- Effectuez régulièrement un contrôle visuel de la télécommande et du câble électrique pour détecter des signes d'usure, des traces de frottement et des fissures. Il faut également éviter que des liquides ou de la nourriture pénètrent dans les zones électriques ou mécaniques. Si des liquides ou des nourritures pénètrent dans les composants mécaniques ou électriques du fauteuil, ses performances peuvent être altérées, sa durée de vie peut être raccourcie ou le fauteuil peut se bloquer et/ou ne plus fonctionner. Si le fauteuil tombe en panne lorsque l'utilisateur est seul, une situation dangereuse peut se produire.
- La négligence est source d'incendies. Bien que la mousse et le revêtement du fauteuil sont ignifuges et répondent aux normes légales applicables, vous devez prendre les précautions requises pour éviter les incendies.
- Nous déconseillons l'utilisation de tabac ou d'autres produits de tabac lorsque l'utilisateur est dans le fauteuil. Ecartez également le fauteuil des foyers d'incendie potentiels, tels que les poêles électriques et radiateurs.
- Il est défendu de s'asseoir sur les accoudoirs; ceci peut déstabiliser l'ensemble du châssis et affecter le fonctionnement mécanique de votre fauteuil, ce qui réduit la sécurité générale ainsi que la durée de vie du produit.
- Tous les câbles et fils doivent être fixés fermement sous le fauteuil; le connecteur doit être inséré fermement dans la prise.


## 4. Instructions de montage:

### MONTAGE DU DOSSIER:

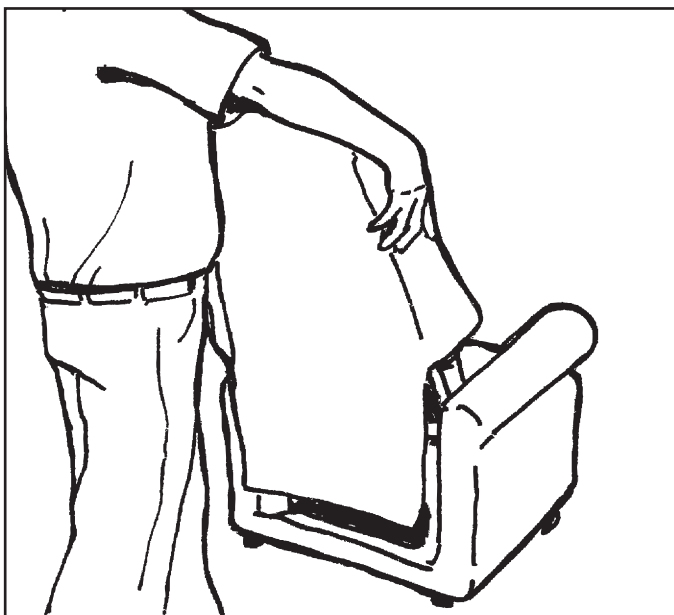


- Commencez par l'installation du dossier.
- Le dossier et l'assise sont emballés séparément.
- Placez les fixations du dossier dans les ouvertures correspondantes et poussez sur le dossier jusqu'à ce que les deux côtés s'encliquètent en même temps en position.

### DEMONTAGE DU DOSSIER:

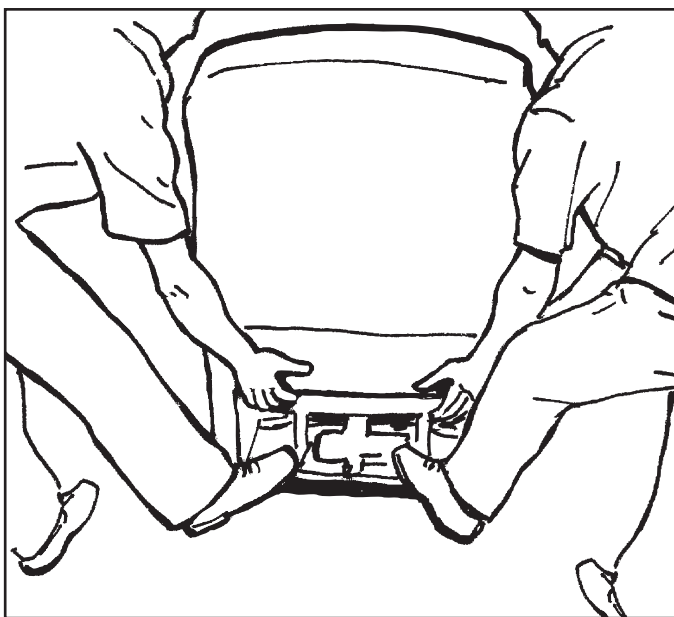


- Le dossier doit être démonté par 2 personnes, de sorte que les 2 côtés du dossier soient levés en même temps.

### CONNECTION À L'ÉLECTRICITÉ

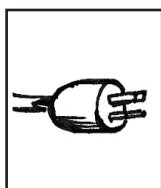

CONNECTION  
AU FAUTEUIL

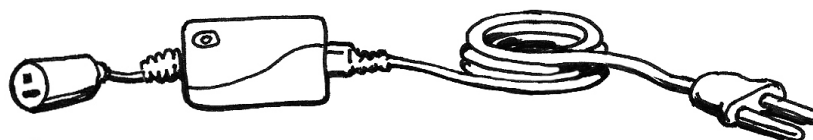

CONNECTION  
ÉLECTRICITÉ


## 5. Instructions d'emploi:

### Fauteuil BELGI

Ce fauteuil peut être relevé pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou se relever, il peut en outre incliner le dossier et relever le repose-pied en un seul mouvement.

#### S'asseoir:

Positionnez-vous à côté du fauteuil et poussez sur le bouton MONTER (1) pour faire monter le fauteuil jusqu'à une hauteur qui vous permettra de vous appuyer contre le siège. Cette hauteur varie selon la taille de l'utilisateur. Si le fauteuil a atteint la hauteur désirée, vous vous appuyez contre le siège et vous poussez sur le bouton DESCENDRE (2). Lorsque le fauteuil descend, vous êtes amené automatiquement en position assise. Lâchez le bouton DESCENDRE (2) dès que vous vous trouvez dans une position confortable.

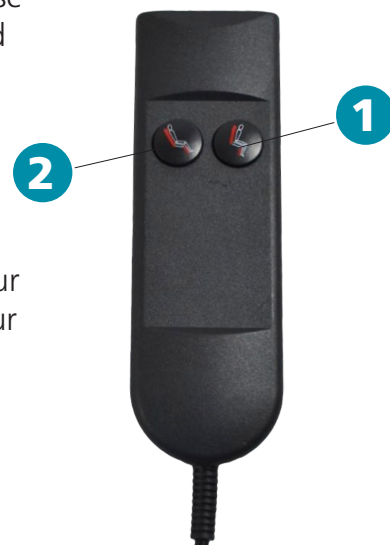

#### Incliner le dossier et relever le repose-pied

Poussez sur le bouton DESCENDRE (2) et penchez-vous en arrière lorsque le dossier s'incline et le repose-pied se relève en même temps. Dès que vous vous trouvez dans une position confortable, vous lâchez le bouton DESCENDRE (2) pour arrêter le mouvement du fauteuil.

#### Se relever:

Poussez sur le bouton MONTER (1). Si le dossier est incliné, il se redresse en position assise, puis commence à monter doucement et lentement. Déplacez votre poids en avant lors de la montée. Pour garder votre équilibre pendant la montée, vous pouvez vous tenir aux accoudoirs. Si le fauteuil atteint une hauteur qui vous permet de vous lever facilement, vous lâchez le bouton MONTER (1).






## Fauteuil CAREY

Ce fauteuil peut être relevé pour aider l'utilisateur à s'asseoir ou se relever.  
On sait manipuler le dossier et repose-pied **SÉPARÉMENT**.

### S'asseoir:

Positionnez-vous à côté du fauteuil et poussez sur le bouton 1 pour faire monter le fauteuil jusqu'à une hauteur qui vous permettra de vous appuyer contre le siège. Cette hauteur varie selon la taille de l'utilisateur. Si le fauteuil a atteint la hauteur désirée, vous vous appuyez contre le siège et vous poussez sur le bouton 2. Lorsque le fauteuil descend, vous êtes amené automatiquement en position assise. Lâchez le bouton 2 dès que vous vous trouvez dans une position confortable.

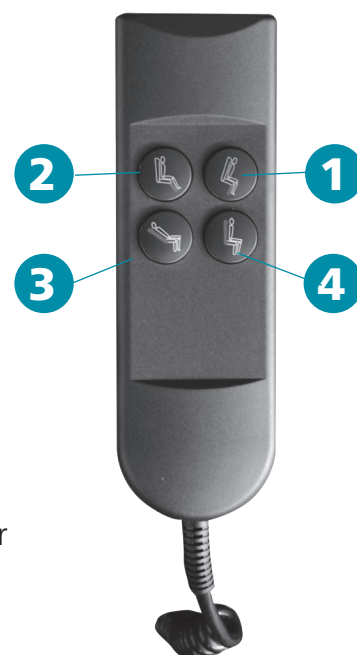

### Commander le dossier:

Poussez sur le bouton 3 et penchez-vous en arrière lorsque le dossier s'incline. Si vous poussez sur le bouton 4, le dossier se remonte. Dès que vous vous trouvez dans une position confortable, vous lâchez le bouton 4 pour arrêter le mouvement du fauteuil.

### Commander la partie pieds:


Poussez sur le bouton 2: la partie pieds se monte. Poussez sur le bouton 1: la partie pieds redescend. Dès que vous vous trouvez dans une position confortable, lâchez le bouton.

### Se relever:

Poussez sur le bouton 4 pour remonter le dossier. Ensuite sur le bouton 1: le repose-pied descend et le dossier remonte. (Vous pouvez pousser les boutons 4 et 1 ensemble). Déplacez votre poids en avant lors de la montée. Pour garder votre équilibre pendant la montée, vous pouvez vous tenir aux accoudoirs. Si le fauteuil atteint une hauteur qui vous permet de vous lever facilement, vous lâchez le bouton 1.

### Entièrement incliné:

Commencez de la position "asseoir" et poussez le bouton 2 et 3. La partie dossier et la partie pieds se mettent dans la position horizontale. Pour relever du fauteuil poussez le bouton 1 et le bouton 4.

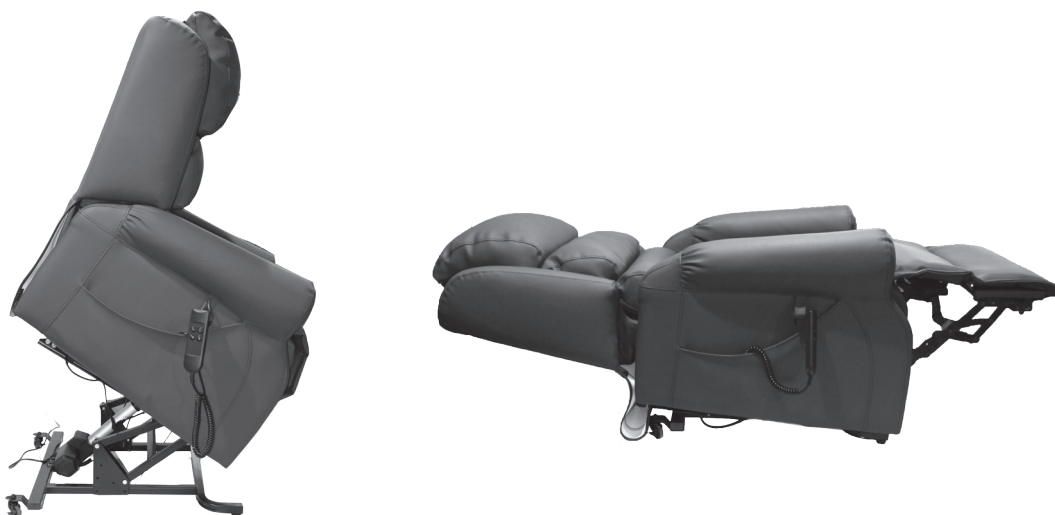

## 6. Entretien:

### Entretien de PU:

- PU se compose d'un textile revêtu de TPU (polyuréthane thermoplastique).
- Les produits PU sont biologiquement dégradables.
- Les produits PU se hydrolysent / se décomposent au fil de temps.
- A la surface, la couche TPU peut obtenir un aspect sec, poudreux ou désintégré.
- N'utilisez pas de chiffons ou buvards trempés dans l'alcool ou dans l'eau, ni des liquides ou produits chimiques pour nettoyer votre fauteuil PU.
- Utilisez une huile spéciale pour l'entretien de cuir; ainsi, vous appliquez une couche de protection sur le revêtement PU, ce qui prolongera sa durée de vie.

### Systèmes électriques :

Vérifiez régulièrement que le câble et la télécommande ne présentent pas de fissures, signes d'usure, trous. Vérifiez également la fixation des câbles.  
Dépoussiérez et enlevez les débris et les saletés autour et au-dessous du fauteuil.


### Entretien et maintenance:

Nos fauteuils / releveurs électriques sont libres d'entretien et ne nécessitent pas de maintenance régulière. En cas de problèmes ou si vous avez besoin de pièces d'échange, vous pouvez contacter votre distributeur local.

## 7. Spécifications:

**Le fauteuil BELGI doit être installé à AU MOINS 15 cm du mur. Le fauteuil Carey a besoin de 60 cm du mur pour éviter tout endommagement du fauteuil et/ou du mur ainsi que toute blessure physique de l'utilisateur pendant la commande du fauteuil.**

- Vérifiez les spécifications reprises sur les composants électriques à l'intérieur du fauteuil pour connaître l'information la plus précise et la plus récente.

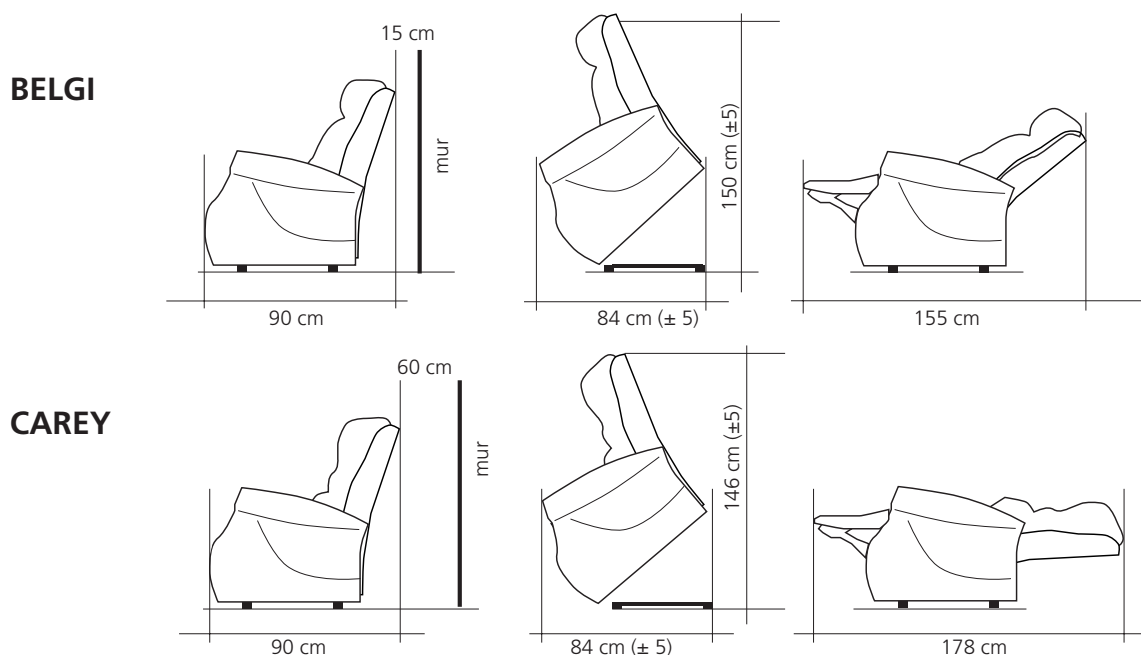

### Electronique:

- input AC 100V-240V, output DC 29V.
- consommation 52W (dépendant du poids de l'utilisateur), standby 0.3W.

## 8. Garantie:

Votre fauteuil de relax est couvert par une garantie étendue de **2 ans pour les composants électriques et mécaniques et 3 ans pour le revêtement PU, à partir de la date d'achat.**

### Conditions de garantie :

1. Cette garantie ne peut pas être transférée.
2. Toutes les réparations et autres travaux d'entretien au fauteuil sont à exécuter par un distributeur local agréé. Si les travaux sont exécutés par une personne autre qu'un distributeur local agréé, la garantie devient nulle. Contactez le distributeur duquel vous avez acheté le fauteuil.
3. En aucun cas, la garantie ne sera applicable si le fauteuil nécessite des réparations suite à:
  - Un entretien des composants du fauteuil non-conforme aux spécifications du fabricant.
  - L'emploi de composants non-spécifiés par le fabricant.
  - L'endommagement du fauteuil ou de ses composants par négligence, accident ou utilisation inadéquate/inappropriée
  - La modification du fauteuil ou de ses composants par rapport aux spécifications du fabricant (ou) des réparations effectuées par une personne autre que votre distributeur local agréé.

Ne sont pas couverts par cette garantie :

- Les dégâts occasionnés par l'utilisation inappropriée du fauteuil par l'utilisateur ou par le dépassement du poids maximal spécifié.
- Décoloration naturelle du matériel au fil du temps ou suite à l'exposition aux rayons solaires.
- Les dégâts occasionnés par des fuites ou des produits renversés.
- Les dégâts occasionnés par le frottement contre les murs et/ou les meubles.
- Les fissures et dégâts accidentels ou les brûlures occasionnées par les cigarettes et allumettes.

En cas de problèmes avec votre fauteuil, vous devez contacter votre distributeur et lui fournir tous les détails, afin de permettre une intervention rapide.



Le certificat CE du produit est valable pour tous les marchés.



Tegelrijstraat 1018  
B-3850 Nieuwerkerken  
T.: 32-(0)11/690.100  
F.: 32-(0)11/690.109  
E.: [info@aksbenelux.be](mailto:info@aksbenelux.be)  
W.: [www.aksbenelux.be](http://www.aksbenelux.be)